


Pour la détection et la différenciation des séquences de gènes *bla_{TEM}*, *bla_{SHV}*, *bla_{IMP}*, *bla_{OXA-1}* et *bla_{NDM}* associées aux colonies pures d'*Enterobacteriaceae*, d'*Acinetobacter baumannii*, ou de *Pseudomonas aeruginosa* résistantes non-susceptibles aux carbapénèmes. À utiliser avec l'instrument Revogene®. Se reporter aux instructions complètes actuelles pour le test correct de contrôles externes et l'interprétation des résultats.

PROCEDURE DE TEST


Comment procéder

1.

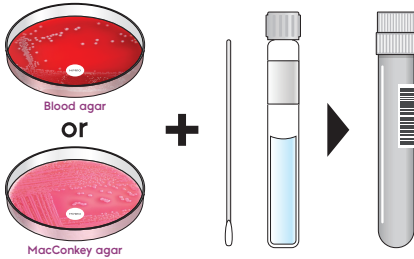


- Transférer des colonies pour obtenir une suspension standard McFarland 0,5.
- Passer la suspension McFarland 0,5 au vortex à vitesse maximale pendant 15 secondes.
- À l'aide d'une micropipette, aspirer 15 µL de suspension McFarland et la mettre dans le tube de tampon pour échantillon (TTE).
- Passer le TTE au vortex à grande vitesse pendant 15 secondes.
- Desceller la pochette contenant la cartouche PIE Revogene® Carba C.

2.

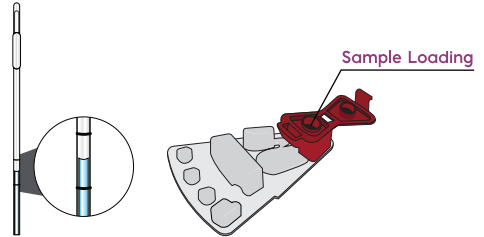

- À l'aide de la pipette de transfert jetable (PTJ), aspirer le tampon pour échantillon (TE) en pressant l'ensemble de la poire jusqu'à ce que le niveau de liquide se trouve à un niveau compris entre les deux lignes de la PTJ.
- Décharger complètement l'échantillon dans la chambre de chargement d'échantillon de la cartouche PIE.
- Bien fermer le capuchon de la chambre de chargement d'échantillon.

3.

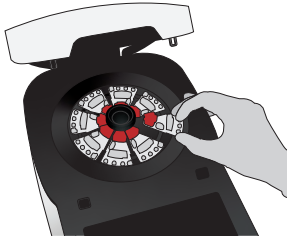

- Suivre les instructions à l'écran pour charger la cartouche PIE de test patient.
- Charger les tests patient restants. Si une quantité de cartouches PIE inférieure à huit (8) va être testée, charger des cartouches MOCK PIE dans les emplacements restants du carrousel.
- Scanner l'anneau de retenue et le placer sur le carrousel.

4.



- Fermer le couvercle de l'instrument des deux mains et veiller à ce que le verrou du couvercle s'enclenche bien.
- Sélectionner «Démarrer» pour démarrer le test et le laisser se réaliser sans supervision.
- Le couvercle s'ouvre quand la série est terminée.
- Une fois la série terminée, enlever toutes les cartouches PIE, y compris les cartouches MOCK PIE.
- Toucher l'icône «Résultats» pour accéder aux résultats du test.



Cette illustration est représentative du mode d'emploi actuel et complet au moment de sa publication. Veuillez vous reporter aux versions complètes les plus actuelles des modes d'emploi du test et de l'instrument. www.meridianbioscience.com/pi

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244, USA
Telephone: 513-271-3700

EMEA, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Phone: +39 0331433636
E-mail: MBE-TechService@meridianbioscience.eu

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com